



SIGER DENTAL UNIT



Technology Brightens Life Classics Originates Innovation



CALIDAD ÓPTIMA, LA MEJOR GARANTÍA

- Siger S60 integra en una atractiva apariencia, la tecnología en estado de arte, máximas prestaciones, una óptima calidad así como una higiénica protección medioambiental para cubrir cualquier necesidad de actualización en la práctica dental.
- Con un diseño ergonómico y total operatividad integrada, el Siger S60 hace su trabajo más conveniente y confortable
- Con una tecnología avanzada, el Siger S60 asegura una operativa cómoda que le hará más ser más eficiente en la práctica dental.
- Con las funciones que desee, el Siger S60 satisface sus necesidades personales y le permite disfrutar plenamente de su trabajo.
- Con una seguridad perfecta, un diseño que favorece la higiene y la calidad que demandan los estándares más exigentes, el Siger S60 le hará olvidar sus perjuicios para garantizar el éxito en su trabajo.
- El Siger S60 cumple con la norma CE 0434
- Siger , cumple con las normas ISO 9001:2000 y ISO 13485:2003





Diseño Ergonómico

- El diseño del equipo asegura una máxima estabilidad y sensación de comodidad al paciente.
- El diseño interactivo entre el respaldo y asiento, realiza un movimiento excelente sin temblores con tredelemburg .
- El cabezal de doble articulación permite acomodar a pacientes de todas las diferentes tallas .
- La carcasa de aluminio que cubre el respaldo previene el suficiente espacio para las piernas del doctor y asistente en una correcta postura de trabajo..

Tecnología Avanzada

- Control inteligente de las posiciones de trabajo, posición escupidera , entrada y salida y la lámpara operativa incrementan el nivel de confort de l paciente y reduce el tiempo de intervención.
- Scaler integrado, lámpara de polimerización por leds, visor radiográfico por leds integrado y otro panorámico con aumento , están disponibles como opción .
- También como opción, la unidad dental puede ser equipada con cámara intraoral y monitor integrados en el equipo paara hacerlo más eficaz en la comunicación con el paciente.
- La prestación inter-locking permite al asistente reemplazar las fresas del instrumental mientras el doctor opera con otro instrumento, ahorrando tiempo tanto al profesional como al paciente.
- El descolgar o colgar los instrumentos del grupo doctor esta controlado por avanzadas células foto - eléctricas
- La creatividad y moderno concepto del diseño del panel de control , asegura una operatividad cómoda y sencilla.
- El freno neumático capacita el libre movimiento del grupo doctor.





Para El Personal del Equipo Profesional

- Prestaciones disponibles en el grupo asistente: Acceso al control del movimiento del sillón, control del llenado del vaso y barrido de la escupidera, mangueras de aspiración, jeringa 3F, lámpara de polimerización por leds (opcional).
- Amplio espacio para el movimiento libre de l personal del equipo operativo.
- La altura del grupo asistente puede ajustarse en tres niveles distintos.


Pedal Multifunción de serie

- A través del pedal multifunción se puede acceder a: Ajuste del la velocidad lineal de la turbina, del micromotor de aire o eléctrico o la potencia del scaler, capturar imágenes de la cámara intraoral, activar o desactivar el spray de los instrumentos o la jeringa, control inteligente de las memorias de las posiciones del sillón, etc, otras operaciones libres de programación y fácil desinfección.





Technology Brightens Life Classics Originates Innovation

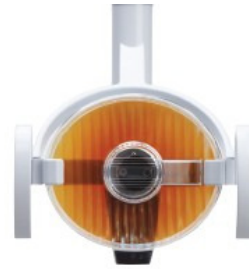

Diseño Ergonómico
Tecnología avanzada



Pensado Para La Seguridad y La Higiene

- El filtro interno de aspiración cuenta con un cierre clínico más limpio y seguro
- La tapicería tratada y sin costuras para un mejor limpieza y desinfección.
- La pieza de apoyo de los instrumentos puede ser retirada para su limpieza y desinfección.
- La escupidera cerámica de una sola pieza puede ser girada y desmontada fácilmente para su limpieza y desinfección
- Los instrumentos dinámicos como turbina, micromotor y scaler están diseñados con el sistema anti succión del agua del spray para prevenir la contaminación con gérmenes mediante la emisión de un flujo de aire por un tiempo predeterminado cada vez que el instrumento finaliza su trabajo.
- Sistema de botella para agua destilada para tratamiento germicida.
- Sistema interno de flujo de limpieza y desinfección de tubos internos y mangueras de aspiración por agua y desinfectante específico.
- Una tecnología única y de apertura automática para reemplazar el agua destilada que lo hace incluso más fácil.
- Un sistema de seguridad para el sillón paciente en la bajada en presencia de cualquier obstáculo. El sillón se moverá ligeramente hacia arriba para liberar el obstáculo que lo ocasionó.
- Para prevenir cualquier pérdida de tiempo, un sistema de seguridad impide que cualquier otro instrumento funcione si ya hay uno de ellos descolgado de su soporte y en uso.
- Cuando la escupidera está desplazada hacia el paciente, el movimiento del sillón esta limitado hasta su altura.

-  4 - NARANJA
-  3 - AZUL CLARO
-  2 - AZUL MEDIO
-  1 - AZUL OSCURO
-  5 - VERDE



