



DEEP BLUE® - SMART LED
INTELIGENCIA Y FÁCIL MANEJO

CONEXIÓN FLEXIBLE

> Deep Blue®-Smart LED es compatible con la manguera original Piezon® en todas las unidades Piezon® de EMS, incluyendo el sillón dental - plug & play

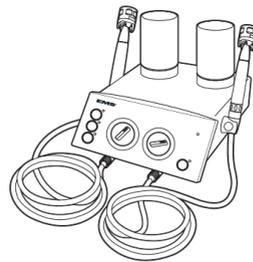

Piezon® Master 600

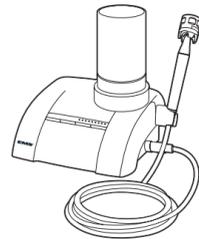


miniMaster®



mini Piezon®



Air-Flow® S2

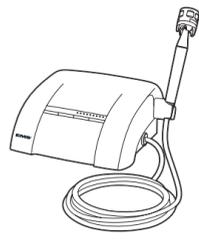


Kermit®



Piezon® Master 400

CONEXIÓN CÓMODA

> Deep Blue®-Smart LED con manguera propia y conexión para el sillón dental

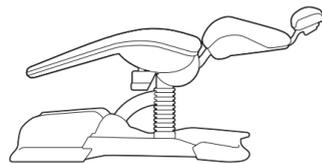

© EMS SA PA 2647ES Edition 2007/08

SMART
LED

DEEP BLUE®

"I FEEL
GOOD"

WWW.EMS-SWISSQUALITY.COM

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon

Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
welcome@ems-ch.com
www.ems-dent.com

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
ESPAÑA S.L.
BERNARDINO OBREGÓN 14 BIS
28012 MADRID

TLF. +34 91 52 89 989
FAX +34 91 53 93 489
ems-es@arrakis.es

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

DEEP BLUE® → SMART LED

PESO EXTRA LIGERO Y CONEXIÓN
DIRECTA A TODAS LAS UNIDADES
PIEZON® DE EMS

SÓLO 90G: INCLUYENDO LA GUÍA DE FIBRA DE 8 MM

- > Ergonómico y cómodo, agarre perfecto, similar a un mango
- > "ON" / "OFF" simplemente presionando / soltando el pedal
- > Una señal cada 5 segundos permite un curado controlado

SISTEMA HERMÉTICO

- > Higiénico, protegido contra la humedad
- > La técnica más moderna sin ventilador ni ranuras de ventilación (nidos de bacterias)
- > Funcionamiento extremadamente silencioso

MENOS ES MÁS



GUÍA DE FIBRA ÓPTICA

- > Máxima potencia, salida de luz focalizada
- > Fotocurado en profundidad
- > Autoclavable

GUÍA ÓPTICA
OPALESCENTE



8 mm = 1 100 mW/cm²



5 mm = 2 100 mW/cm²

GUÍA ÓPTICA
NEGRA



8 mm = 1 000 mW/cm²



5 mm = 1 800 mW/cm²



3 mm = 2 200 mW/cm²


> Para casi todas las aplicaciones

> Para superficies reducidas,
p. ej. para ortodoncia

> Para superficies mínimas,
p. ej. aplicación en la superficie de contacto
de los dientes, cavidades profundas o Veneers


DEEP BLUE® LLEVA LA DELANTERA →

ESPECTRO DE EMISIÓN Y COMPATIBILIDAD CON LA CAMFORQUINONA

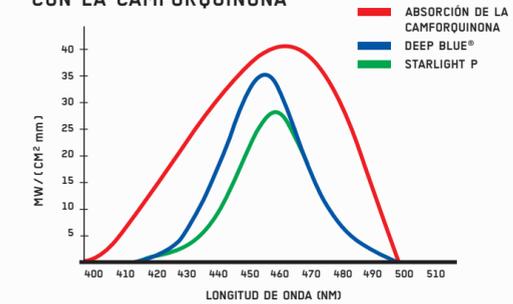

TODA LA INFORMACIÓN SE BASA EN DATOS DE PRUEBA DEL LABORATORIO EMS.
STARLIGHT P NO ES UNA MARCA REGISTRADA DE EMS.
DEEP BLUE® - SMART LED SUMINISTRA LUZ ACTÍNICA CON UNA LONGITUD DE ONDA ENTRE 430 Y 480 NM.

PROFUNDIDAD DE TRATAMIENTO: TRATAMIENTO DE 10 S ISO 4049: 2000 (F)

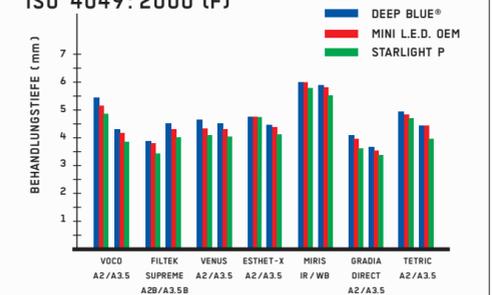

TODA LA INFORMACIÓN SE BASA EN DATOS DE PRUEBA DEL LABORATORIO EMS.
STARLIGHT P Y MINI L.E.D. OEM NO SON MARCAS REGISTRADAS DE EMS.



PROTECCIÓN DE LOS OJOS

→ INMEDIATAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE DENTAL O EN LA GUÍA ÓPTICA



> Pantalla de protección en PMMA – no autoclavable



> Capuchón de protección en silicona – autoclavable